

すこしの水で
しっかりキレイ

KEEPURE™

除菌ドライシート

好評発売中!



160
枚入

詳しくは当社営業、販売代理店までお問い合わせください。



CPC除菌ドライシートとは？

- 少しの水※で濡らすと、除菌効果を発揮するドライタイプのペーパータオルです。
- ドライタイプのため、長期的保管に向いています。開封後も、保管条件を気にすることなく、手軽にご使用いただけます。
- 除菌成分CPC(塩化セチルピリジニウム)は、衛生関連製品を中心に多数の使用実績があり、汎用的に使用されています。

NEW

「新型コロナウイルス (COVID-19) に対するCPCの有効性評価」
塩化セチルピリジニウム (CPC) 0.05%水溶液において、新型コロナウイルス (COVID-19) を99.99%減少させることを確認しました。

※詳細は裏面をご確認ください。

※一般財団法人 日本繊維製品品質技術センターにて試験実施。

少しの※

水



除菌成分

CPC



+



※最適な水分量：除菌ドライシート1枚あたり水分2g（小さじ約1/2）



こんな時に使用できます

少量の水で効果を発揮するため使用場所を選ばず、ご家庭や学校、高齢者施設や病院での日常生活から、防災備蓄用など様々なシーンでご使用いただけます。

いざという時の
防災備品として



身の回りの
お掃除に



濡れた
テーブル拭きに



実験器具
の拭き取りに



裏話

**KeePureシリーズ
名前の由来**

Keep（保つ） + Pure（キレイ、純粋な）の造語。
防災用に保管するというイメージの「Keep」と、富士フイルム和光純薬のブランドイメージである「Pure」を組み合わせました。



新型コロナウイルス（COVID-19）に対するCPCの有効性評価

塩化セチルピリジニウム（CPC）0.05%水溶液において、新型コロナウイルス（COVID-19）を99.99%減少させることを確認しました。

※一般財団法人 日本繊維製品品質技術センターにて試験実施

●試験条件

試験ウイルス : SARS-CoV-2
試験サンプル : 0.05% 塩化セチルピリジニウム水溶液（使用した製品：732-17349）
試験条件 : ウイルス懸濁液：試験サンプル＝1：9
作用温度 25℃
作用時間 15秒/5分
感染価測定法 : ブラーク測定法

●試験結果

試料サンプル		ウイルス感染価（PFU/mL） の常用対数値	精製水（ブランク）との 常用対数値差（PFU/mL）	精製水（ブランク）に対する ウイルス減少率
精製水（ブランク）		7.39	－	－
0.05%CPC水溶液	15秒作用後	5.28	2.1	99%
	5分作用後	<3.00	4.4	99.99%

※この結果は、試料サンプルに対する試験結果であり、製品品質を保証するものではありません。



除菌ドライシートの除菌性能試験

●ウェットタイプと同じ除菌性能テスト済み

一般財団法人日本衛生材料工業連合会の認定試験機関の「ウェットワイパー類の除菌性能試験方法」に準拠して、性能試験を実施しました。
【対象となる菌】黄色ブドウ球菌・大腸菌

※一般社団法人 北里環境科学センターにて試験実施

●試験結果と除菌性能


主成分CPCを配合した除菌ドライシート全体にJIS硬水を一定量含浸させ、除菌性能試験を行ない除菌効果を調べた結果です。

除菌ドライシート（JIS硬水2g含浸）の試験結果

対象となる菌	結果
大腸菌	99.9%以上除菌
黄色ブドウ球菌	99%以上除菌

除菌性能試験
黄色ブドウ球菌

洗い出しシャーレ
（原液 100 倍希釈）

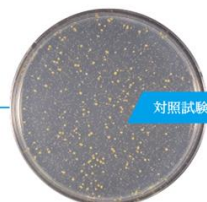

対照試験布



99%
以上除菌
除菌ドライシート

製品情報

商品名	除菌ドライシート
製品コード	296-36311 1箱(160枚×36パック入り)
希望納入価格	照会
シートサイズ	220mm×230mm
ケースサイズ	240mm×720mm×340mm （縦×横×高さ）
原材料	再生紙
紙に含まれる成分	塩化セチルピリジニウム（CPC）、 エデト酸二ナトリウム（EDTA-2NA）



YouTubeで
使い方動画公開中!!



【注意事項】

- 除菌効果は水分を含んだ状態で発揮されます。（最適な水分量：除菌ドライシート1枚あたり水分2g）乾燥状態・過剰水分下では除菌効果は得られません。
- すべての菌を除菌できるわけではありません。
- CPCはすべてのウイルスを減少させるわけではありません。
- 皮膚に異常が見られる場合、使用を中止し、医師に相談してください。
- 水で溶けませんのでトイレには流さないでください。
- 日のあたる場所や高温・多湿の場所を避けて保管してください。

FUJIFILM

富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 大阪市中央区道修町三丁目1番2号
東京本店 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号

フリーダイヤル 0120-052-099

試薬URL : <https://labchem-wako.fujifilm.com/>

製造元

太洋紙業株式会社
〒418-0022 静岡県富士宮市小泉笠井田350